

**snogg®**

ANIMAL CARE



# Animal WOUND CARE

ETT SÅRVÅRDSKONCEPT FÖR DJUR



snögg®

ANIMAL CARE

- ✓ Lätt att applicera och ta bort, utan onödigt obehag för djuret
- ✓ Kan användas på svårhanterliga områden på djurets kropp
- ✓ Mångsidig användning  
– kombinera och anpassa för alla djurtyper och stadier i sår läkningsprocessen
- ✓ För behandling och stöd
- ✓ Förpackningsdesign med tydliga instruktioner



## Sårvård för djur sedan 1980

*Snögg Animal Care* har mer än 40 års erfarenhet av sårvård för djur. Produkterna är avsedda för användning på djur – med fokus på djurens välbefinnande. Utvecklat i samarbete med veterinärer och experter på sårvård för djur. Produktsortimentet omfattar olika typer av förband som enkelt kan anpassas efter olika behov och områden på kroppen, vilket ger användaren kreativ frihet.

# Adhesive FOAM BANDAGE

LATEX-  
FRI

## NÄR DU BEHÖVER BRA FÄSTE PÅ PÄLS

- Fäster på ena sidan
- Idealiskt för vaddering och fixering
- Mjukt och flexibelt




REF 510002410  
(Tidigare Animal Polster)  
9 x 200 cm


REF 510002412  
(Tidigare Animal Polster)  
14 x 200 cm

REF 510002413  
(Tidigare Animal Polster)  
22 x 200 cm


## Lägga sårförband:

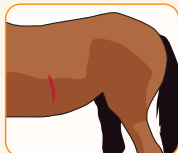

Se till att såret är rent och att pälsen är torr.

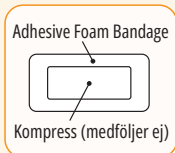

Använd en kompress för att skydda såret.

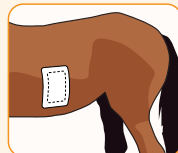

Fixera kompressen med Adhesive Foam Bandage.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

# Adhesive Foam Bandage REMOVAL WIPES

## SKONSAMMARE BORTTAGNING AV ADHESIVE FOAM BANDAGES

- Underlättar borttagning
- Enkel och effektiv användning
- Alkoholfri formel



REF 510002378  
30 servetter (12 x 18 cm)

# Thick & Thin FOAM BANDAGE

LATEX-FRI

## FÖR FLEXIBILITET OCH RÖRELSEFRIHET

- Självhäftande
- Kan placeras direkt på såret
- Absorberande, mjukt och flexibelt



**REF 510002411**  
*(Tidigare Animal Vet)*  
9 x 200 cm



**REF 510002379**  
*(Tidigare Animal Soft)*  
6 x 450 cm

### Tassbandage:



Linda en bit av Thick eller Thin Foam Bandage runt benet.



Riv av en lämplig längd så att den passar mellan tårna. Fäst till omslaget och vrid 180 grader.



Placera den smala delen mellan tårna och fäst bandaget på andra sidan. Upprepa för varje tå.



Avsluta genom att linda ett andra bandage runt benet för att säkra förbandet.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

# Flex WRAP BANDAGE

## ETT YTTRE SKYDDANDE FÖRBAND

- Snabbt och enkelt att applicera och avlägsna
- Självhäftande
- Skyddar från smuts och fukt



**REF 510002414**  
5 x 450 cm

**REF 510002393**  
10 x 450 cm



Underlätta  
borttagning av  
Adhesive Foam  
Bandage med  
**REMOVAL  
WIPES**



## ÖVERSIKT

	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Självhäftande – fastnar inte i päls, hud eller sår	✗	✓	✓	✓
Bra fästförmåga på päls och hud	✓	✗	✗	✗
Tvårelastisk	✓	✓	✓	✗
Längdelastisk	✗	✓	✓	✓
Absorberande	✗	✓	✓	✗
Stoppar blödning	✗	✓	✓	✗
Vidhäftande även när det är vått	✗	✓	✓	✗
Lämpligt som första lager	✗	✓	✓	✗
Lämpligt som andra lager	✓	✓	✓	✓
Lämpligt som tredje lager	✓	✗	✗	✓
Fixering	✓	✓	✓	✓
Tjocklek	5 mm	5 mm	1,9 mm	

# Primärförband

**Snögg** utvidgar sortimentet med tre förband för olika typer av sår, inklusive små sår, kraftigt vätskande sår och sår med infektionsrisk.

De tre primärförbanden fixeras lämpligen med *Adhesive Foam Bandage*.

## Foam COMPRESS



### FRÄMJAR SÅRLÄKNING

- Steril och absorberande
- Skapar fuktig sårläkning
- Mjuk och flexibel

Nyhet



REF 510003122  
10 st (10 x 10 cm)

REF 510003123  
10 st (5 x 5 cm)

## Superabsorbent COMPRESS



### FÖR KRAFTIGT VÄTSKANDE SÅR

- Steril
- Hög absorptionsförmåga
- Hjälper till att förhindra läckage

Nyhet



REF 510003124  
10 st (10x10 cm)

REF 510003125  
10 st (10 x 20 cm)

# BactiDefend DRESSING


**MINSKAR BIOBÖRDAN MED  
UPP TILL 99%**

**Nyhet**

- Med peptider som efterliknar immunförsvaret
- Binder och förstör bakterier
- Främjar sårhäkning



**REF 510003786**  
5 st (4,5 x 15 cm)

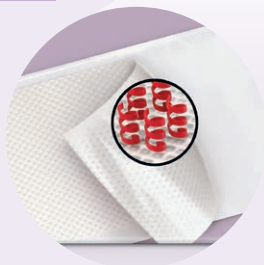

## ÖVERSIKT

	BACTIDEFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Lågt vätskande sår	✓	✓	✗
Medelvätskande sår	✗	✓	✓
Kraftigt vätskande sår	✗	✗	✓
Sår med infektionsrisk	✓	✗	✗
Kirurgiska sår	✓	✓	✓
Binder och förstör bakterier	✓	✗	✗
Fuktig sårhäkning	✓	✓	✗
Steril	✓	✓	✓
Kan klippas till önskad storlek	✓	✓	✗
Lämplig att fixera med Adhesive Foam Bandage	✓	✓	✓



**snogg**<sup>®</sup>

ANIMAL CARE

[www.snogg.com](http://www.snogg.com)

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15),  
Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige  
Tel +46 (0)8 590 96325,  
[snogganimal@orkla.com](mailto:snogganimal@orkla.com)