

**snogg®**

ANIMAL CARE



— Animal —  
**WOUND CARE**

FÖR BEHANDLING OCH STÖD



# — SNÖGG ANIMAL CARE — Nya produkter & storlekar

*Snögg Animal Care* lanserar en ny förbättrad förpackningsdesign med tydligare instruktioner för att underlätta användning. Sortimentet har dessutom utökats med två nya produkter för att erbjuda ett mer komplett utbud av sårvård för djur.

## Ny design



## Gammal design



## Sårvård för djur sedan 1980

Snögg Animal Care har mer än 40 års erfarenhet av sårvård för djur. Produkterna är avsedda för användning på djur – med fokus på djurens välbefinnande. Utvecklat i samarbete med veterinärer och experter på sårvård för djur.

Produktsortimentet omfattar olika typer av förband som enkelt kan anpassas efter olika behov och områden på kroppen, vilket ger användaren valmöjlighet och frihet.





- ✓ Lätt att applicera och ta bort – utan onödigt obehag för djuret
- ✓ Kan användas på svårhanterliga områden på djurets kropp
- ✓ Mångsidig användning – kombinera och anpassa för alla djurtyper och stadier i sårläkningsprocessen
- ✓ Kan enkelt kombineras med andra sårvårdsprocedurer
- ✓ För behandling och stöd



# Adhesive FOAM BANDAGE

*Adhesive Foam Bandage* är ett elastiskt skumförband med bra fästförmåga på både päls och hud. Förbandet fäster på ena sidan och är idealiskt för vaddering och fixering, till exempel EKG-elektroder. Du kan enkelt skapa ett sårförband genom att kombinera *Adhesive Foam Bandage* med en kompress eller *Thick Foam Bandage*.

LATEX-FRI

- Mjukt och flexibelt
- Fäster på ena sidan
- Kan appliceras var som helst på djuret



*När du behöver  
bra fäste på päls*

Adhesive Foam Bandage finns i tre storlekar för att passa olika djur och sår:



REF 510002410  
(Tidigare Animal Polster)  
9 x 200 cm




REF 510002412  
(Tidigare Animal Polster)  
14 x 200 cm




REF 510002413 **Ny storlek!**  
(Tidigare Animal Polster)  
22 x 200 cm


### LÄGGA SÅRFÖRBAND:

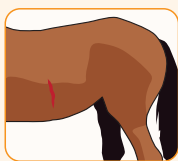

Se till att såret är rent och att pälsen är torr.

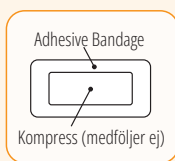

Använd en kompress för att skydda såret.

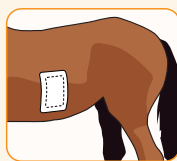

Fixera kompressen med Adhesive Foam Bandage.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

## — Adhesive Foam Bandage — REMOVAL WIPES

Nyhet

Med nya *Removal Wipes* blir det enklare och mer skonsamt att ta bort limrester från djurets päls och obehag och irritation minskas. Alkoholfri formel som inte torkar ut huden. Våtservetterna är ett komplement till *Adhesive Foam Bandages*.

### SKONSAMMARE BORTTAGNING AV ADHESIVE FOAM BANDAGES:

- Underlättar borttagning
- Enkel och effektiv användning
- Alkoholfri formel

LATEX-FRI



REF 510002378  
30 servetter (12 x 18 cm)





*Flexibilitet och rörelsefrihet  
med Thick Foam Bandage*

# Thick FOAM BANDAGE

**Thick Foam Bandage** är ett självhäftande skumförband och klibbar därför inte fast i sår, päls eller hud. Det är flexibelt, erbjuder stor rörlighet och är lätt att forma. Det absorberande och mjuka skumförbandet är idealiskt för användning på sår, för fixering eller vaddering.


LATEX-FRI

- Självhäftande
- Kan placeras direkt på såret
- Absorberande, mjukt och flexibelt




**REF 510002411**  
(Tidigare Animal Vet)  
9 x 200 cm


## TASSBANDAGE:

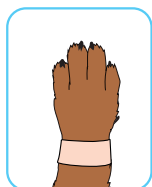


Linda en bit av Thick eller Thin Foam Bandage runt benet.

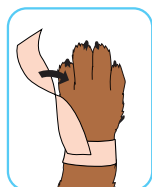

Riv av en lämplig längd så att den passar mellan tårna. Fäst till omslaget och vrid 180 grader.

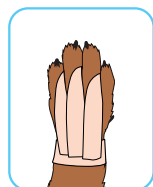

Placera den smala delen mellan tårna och fäst bandaget på andra sidan. Upprepa för varje tå.

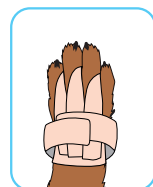

Avsluta genom att linda ett andra bandage runt benet för att säkra förbandet.


## BENBANDAGE:



Se till att såret är rent och att pälsen/benet är torrt.



Börja med att linda en omgång Adhesive Foam Bandage under det skadade området för fixering.

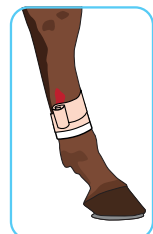

Linda sedan Thick Foam Bandage över såret i ett spiralliknande mönster. Överlappa det första förbandet med 2–3 cm.



Byt ut det andra förbandet vid behov. Det första förbandet tas bort när såret är läkt.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

# Thin FOAM BANDAGE

**Thin Foam Bandage** är flexibelt och lätt att forma. Det tvärelastiska förbandet är självhäftande och klibbar inte fast i sår, päls eller hud. Det är mjukt, absorberande och kan placeras direkt på såret.


LATEX-  
FRI

- Självhäftande
- Kan placeras direkt på såret
- Många användningsområden, exempelvis kospenar




REF 51002379  
(Tidigare Animal Soft)  
6 x 450 cm


## TASSBANDAGE:

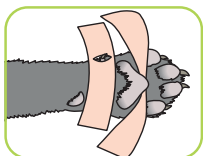


Placera en längd av förbandet mellan tårna och trampdynan. Gör en skåra i förbandet och placera det runt sporen.

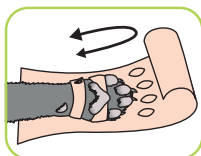

Riv av en passande längd av förbandet. Gör skåror för tårna.

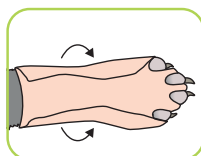

För tårna genom skårorna och vik förbandet som bilden visar.


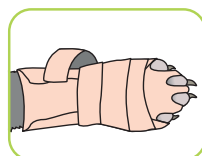


Linda en extra längd av förbandet runt tassens vid behov, för att säkerställa att förbandet sitter ordentligt.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

## SPENBANDAGE:

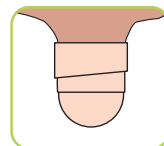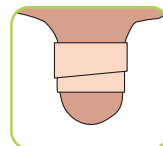

Använd Thin Foam Bandage vid skada på juver och spenar.



A close-up photograph of a tabby cat lying on a green, textured surface. The cat has a white patch on its chest and is looking towards the camera. A light-colored, self-adhesive bandage is applied to the bridge of its nose. The image is framed by a white circular border on the left side.

*Elastiska och självhäftande  
Thin Foam Bandage*

*Ett yttre förband som är idealiskt  
för fixering av kompresser  
och bandage*



# Flex WRAP BANDAGE

Nyhet

**Flex Wrap Bandage** är ett flexibelt och elastiskt yttre förband. Det fastnar inte i vare sig päls, hud eller sår och är idealiskt för fixering av kompresser och självhäftande skumförband. Skyddar mot smuts och fukt och passar på många delar av djurets kropp. Finns i två storlekar, förpackade i en praktisk kartongdisplay.

- Snabbt och enkelt att applicera och avlägsna
- Självhäftande
- Skyddar från smuts och fukt



REF 510002414  
5 x 450 cm

REF 510002393  
10 x 450 cm

# — SNÖGG ANIMAL CARE —

## Produktöversikt

Underlätta  
borttagning av  
Adhesive Foam  
Bandage med  
**REMOVAL  
WIPES**

Nyhet



Nyhet

	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Självhäftande – fastnar inte i päls, hud eller sår	X	✓	✓	✓
Fäster på päls – bra fästförmåga på päls och hud	✓	X	X	X
Tvårelastisk	✓	✓	✓	X
Längdelastisk	X	✓	✓	✓
Absorberande	X	✓	✓	X
För att stoppa blödning	X	✓	✓	X
Vidhäftande även när det är vått	X	✓	✓	X
Lämpligt som första lager	X	✓	✓	X
Lämpligt som andra lager	✓	✓	✓	✓
Lämpligt som tredje lager	✓	X	X	✓
Fixering	✓	✓	✓	✓
Tjocklek	5 mm	5 mm	1,9 mm	
REF / Storlek	<b>REF 510002410</b> 9 x 200 cm <b>REF 510002412</b> 14 x 200 cm <b>REF 510002413</b> 22 x 200 cm <hr/> <b>REF 510002378</b> (Removal wipes) 30 servetter (12 x 18 cm)	<b>REF 510002411</b> 9 x 200 cm	<b>REF 510002379</b> 6 x 450 cm	<b>REF 510002414</b> 5 x 450 cm <b>REF 510002393</b> 10 x 450 cm

[www.snogg.com](http://www.snogg.com)