


snogg®

ANIMAL CARE



Animal WOUND CARE

FÖR BEHANDLING OCH STÖD

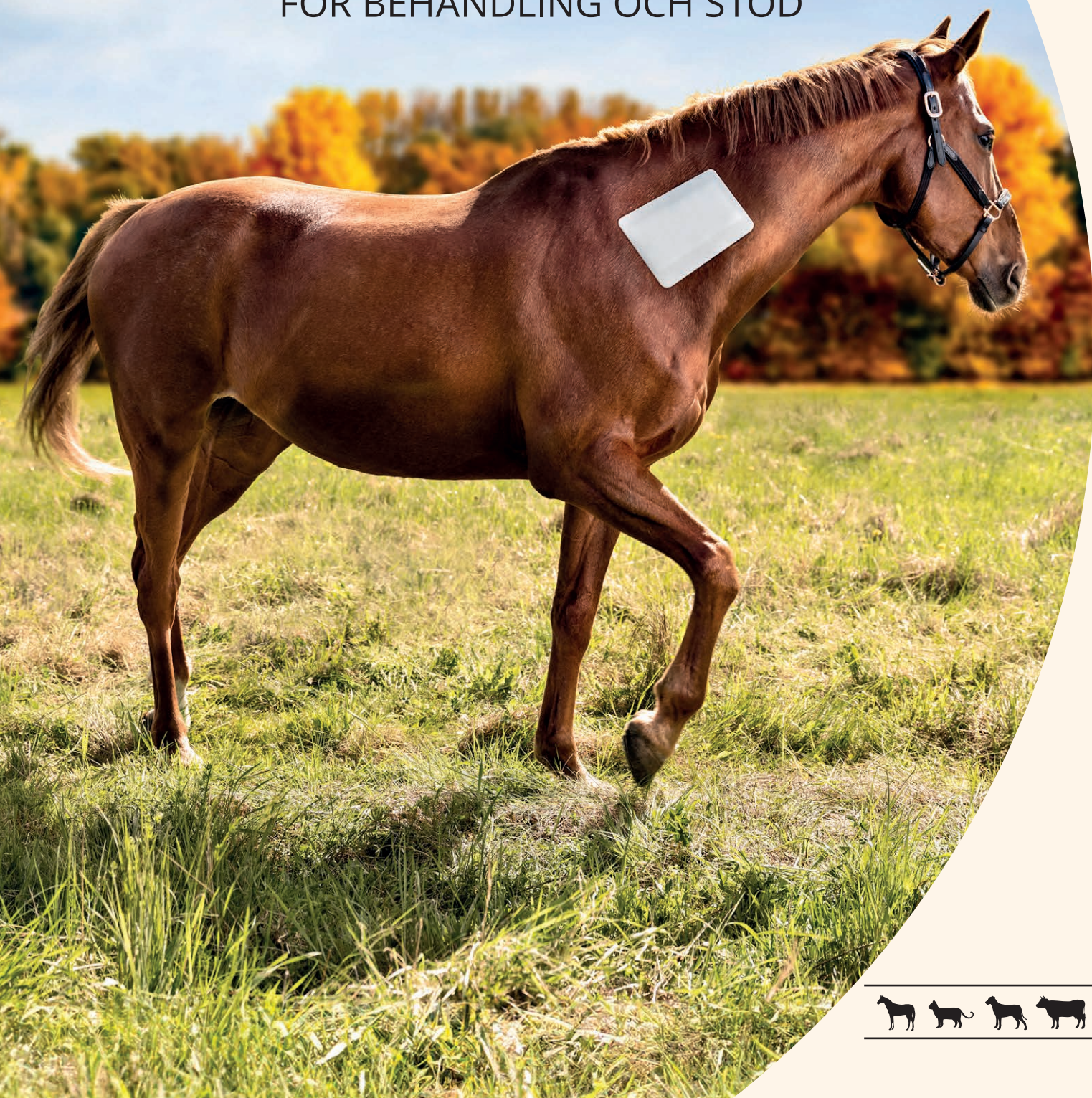

Sårvård för djur sedan 1980

Snögg Animal Care har mer än 40 års erfarenhet av sårvård för djur. Produkterna är avsedda för användning på djur – med fokus på djurens välbefinnande. Utvecklat i samarbete med veterinärer och experter på sårvård för djur. Produktsortimentet omfattar olika typer av förband som enkelt kan anpassas efter olika behov och områden på kroppen, vilket ger användaren valmöjlighet och frihet.



Var kan Adhesive Foam Bandage användas? Få svar på det och mer på vår hemsida. Skanna QR-koden för att komma till FAQ!

Nyhet



Snögg utvidgar sortimentet med tre förband för olika typer av sår, inklusive små sår, kraftigt vätskande sår och sår med infektionsrisk. De tre primärförbanden fixeras lämpligen med **Adhesive Foam Bandage**.



- ✓ Lätt att applicera och ta bort – utan onödigt obehag för djuret
- ✓ Kan användas på svårhanterliga områden på djurets kropp
- ✓ Mångsidig användning – kombinera och anpassa för alla djurtyper och stadier i sårläkningsprocessen
- ✓ Kan enkelt kombineras med andra sårvårdsprocedurer
- ✓ För behandling och stöd
- ✓ Förpackningsdesign med tydliga instruktioner



Primärförband

Snögg utvidgar sitt sortiment med tre nya primärförband för att möta fler behov inom sårvård. De nya förbanden är framtagna för att hantera olika typer av sår och tillstånd: små sår, kraftigt vätskande sår och sår med risk för infektion. De fungerar utmärkt att kombinera med övriga sårvårdsprodukter och fixeras lämpligen med hjälp av *Adhesive Foam Bandage*.

BactiDefend DRESSING

Nyhet

MINSKAR BIOBÖRDAN MED UPP TILL 99%

Ett sterilt hydrogelförband med peptider som efterliknar immunförsvaret. Förbandet binder och förstör bakterier utan att några ämnen läcker ut. Det främjar sårhäkning genom att skapa en fuktig miljö. Säker och biokompatibel. Endast för professionell användning. Använd på torra eller lågt vätskande sår.

- Med peptider som efterliknar immunförsvaret
- Binder och förstör bakterier
- Främjar sårhäkning



REF 510003786
5 st (4,5 x 15 cm)

Foam COMPRESS



FRÄMJAR SÅRLÄKNING

En steril och absorberande skumkompress som håller såret fuktigt och främjar sårhäkning. Ett mjukt och flexibelt förband som följer kroppens rörelser. Det fastnar inte i såret och kan klippas till önskad storlek.

- Steril och absorberande
- Skapar fuktig sårhäkning
- Mjuk och flexibel

Nyhet



REF 510003122
10 st (10 x 10 cm)



REF 510003123
10 st (5 x 5 cm)

Superabsorbent COMPRESS



FÖR KRAFTIGT VÄTSKANDE SÅR

En steril kompress med hög absorptionsförmåga för kraftigt vätskande sår. Den inre superabsorberande kärnan kan absorbera stora mängder vätska. Exsudatet stannar kvar i kompressen för att förhindra läckage.

- Steril
- Hög absorptionsförmåga
- Hjälper till att förhindra läckage

Nyhet



REF 510003124
10 st (10x10 cm)

REF 510003125
10 st (10 x 20 cm)

Adhesive FOAM BANDAGE

Adhesive Foam Bandage är ett elastiskt skumförband med bra fästförmåga på både päls och hud. Förbandet fäster på ena sidan och är idealiskt för vaddering och fixering, till exempel EKG-elektroder. Du kan enkelt skapa ett sårförband genom att kombinera *Adhesive Foam Bandage* med en kompress eller *Thick Foam Bandage*.

LATEX-FRI

- Mjukt och flexibelt
- Fäster på ena sidan
- Kan appliceras var som helst på djuret



*När du behöver
bra fäste på päls*

Adhesive Foam Bandage finns i tre storlekar för att passa olika djur och sår:



REF 510002410
(Tidigare Animal Polster)
9 x 200 cm




REF 510002412
(Tidigare Animal Polster)
14 x 200 cm




REF 510002413
(Tidigare Animal Polster)
22 x 200 cm


LÄGGA SÅRFÖRBAND:

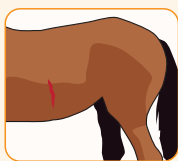

Se till att såret är rent och att pälsen är torr.

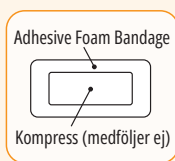

Använd en kompress för att skydda såret.

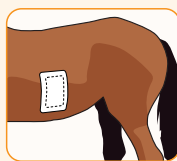

Fixera kompressen med Adhesive Foam Bandage.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

Adhesive Foam Bandage REMOVAL WIPES

Med *Removal Wipes* blir det enklare och mer skonsamt att ta bort limrester från djurets päls och obehag och irritation minskas. Alkoholfri formel som inte torkar ut huden. Våtservetterna är ett komplement till *Adhesive Foam Bandages*.

SKONSAMMARE BORTTAGNING AV ADHESIVE FOAM BANDAGES:

- Underlättar borttagning
- Enkel och effektiv användning
- Alkoholfri formel

LATEX-FRI



REF 510002378
30 servetter (12 x 18 cm)



*Flexibilitet och rörelsefrihet
med Thick Foam Bandage*

Thick FOAM BANDAGE

Thick Foam Bandage är ett självhäftande skumförband och klibbar därför inte fast i sår, päls eller hud. Det är flexibelt, erbjuder stor rörlighet och är lätt att forma. Det absorberande och mjuka skumförbandet är idealiskt för användning på sår, för fixering eller vaddering.


LATEX-FRI

- Självhäftande
- Kan placeras direkt på såret
- Absorberande, mjukt och flexibelt




REF 510002411
(Tidigare Animal Vet)
9 x 200 cm


TASSBANDAGE:

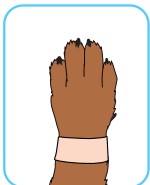


Linda en bit av Thick eller Thin Foam Bandage runt benet.

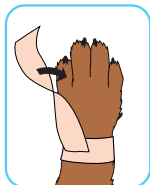

Riv av en lämplig längd så att den passar mellan tårna. Fäst till omslaget och vrid 180 grader.

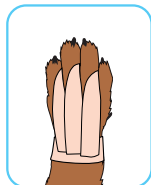

Placera den smala delen mellan tårna och fäst bandaget på andra sidan. Upprepa för varje tå.

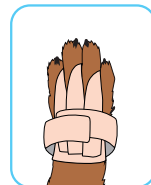

Avsluta genom att linda ett andra bandage runt benet för att säkra förbandet.


BENBANDAGE:



Se till att såret är rent och att pälsen/benet är torrt.



Börja med att linda en omgång Adhesive Foam Bandage under det skadade området för fixering.

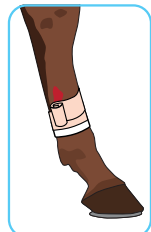

Linda sedan Thick Foam Bandage över såret i ett spiralliknande mönster. Överlappa det första förbandet med 2–3 cm.



Byt ut det andra förbandet vid behov. Det första förbandet tas bort när såret är läkt.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

Thin FOAM BANDAGE

Thin Foam Bandage är flexibelt och lätt att forma. Det tvärelastiska förbandet är självhäftande och klibbar inte fast i sår, päls eller hud. Det är mjukt, absorberande och kan placeras direkt på såret.


LATEX-FRI

- Självhäftande
- Kan placeras direkt på såret
- Många användningsområden, exempelvis kospengar




REF 510002379
(Tidigare Animal Soft)
6 x 450 cm


TASSBANDAGE:

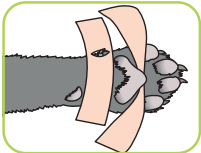


Placera en längd av förbandet mellan tårna och trampdynan. Gör en skåra i förbandet och placera det runt sporren.

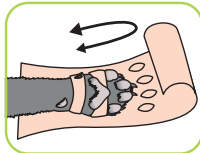

Riv av en passande längd av förbandet. Gör skåror för tårna.

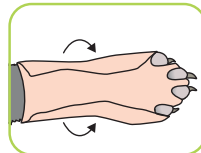

För tårna genom skårorna och vik förbandet som bilden visar.


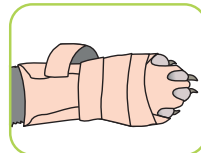


Linda en extra längd av förbandet runt tassens vid behov, för att säkerställa att förbandet sitter ordentligt.



Skanna QR-koden för fler instruktioner.

SPENBANDAGE:

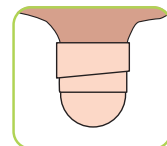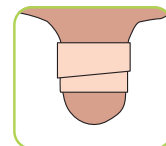

Använd Thin Foam Bandage vid skada på juver och spenar.





*Elastiska och
självhäftande Thin
Foam Bandage*

Flex WRAP BANDAGE

Flex Wrap Bandage är ett flexibelt och elastiskt yttre förband. Det fastnar inte i vare sig päls, hud eller sår och är idealiskt för fixering av kompresser och självhäftande skumförband. Skyddar mot smuts och fukt och passar på många delar av djurets kropp. Finns i två storlekar, förpackade i en praktisk kartongdisplay.

- Snabbt och enkelt att applicera och avlägsna
- Självhäftande
- Skyddar från smuts och fukt



REF 510002414
5 x 450 cm

REF 510002393
10 x 450 cm

Produktöversikt

Underlätta borttagning av Adhesive Foam Bandage med **REMOVAL WIPES**



	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Självhäftande – fastnar inte i päls, hud eller sår	✗	✓	✓	✓
Bra fästförmåga på päls och hud	✓	✗	✗	✗
Tvärelastisk	✓	✓	✓	✗
Längdelastisk	✗	✓	✓	✓
Absorberande	✗	✓	✓	✗
Stoppar blödning	✗	✓	✓	✗
Vidhäftande även när det är vått	✗	✓	✓	✗
Lämpligt som första lager	✗	✓	✓	✗
Lämpligt som andra lager	✓	✓	✓	✓
Lämpligt som tredje lager	✓	✗	✗	✓
Fixering	✓	✓	✓	✓
Tjocklek	5 mm	5 mm	1,9 mm	

Nyhet



	BACTIDEFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Lågt vätskande sår	✓	✓	✗
Medelvätskande sår	✗	✓	✓
Kraftigt vätskande sår	✗	✗	✓
Sår med infektionsrisk	✓	✗	✗
Kirurgiska sår	✓	✓	✓
Binder och förstör bakterier	✓	✗	✗
Fuktig sårsläkning	✓	✓	✗
Steril	✓	✓	✓
Kan klippas till önskad storlek	✓	✓	✗
Lämplig att fixera med Adhesive Foam Bandage	✓	✓	✓

www.snogg.com

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige
Tel +46 (0)8 590 96325, snogganimal@orkla.com, www.snogg.com