

ProphyCare®

By DIRECTA

Directas produkter är utvecklade, testade och utvärderade av vårt eget team av högkvalificerade och välkända svenska och internationella dentalspecialister, med syftet att göra livet enklare för dentala utövare i det dagliga kliniska arbetet.

ProphyCare®

Directas produkter är utvecklade, testade och utvärderade av vårt eget team av högkvalificerade och välkända svenska och internationella dentalspecialister, med syftet att göra livet enklare för dentala utövare i det dagliga kliniska arbetet.

DIRECTA
directadental.com



DIRECTA AB
P.O. Box 723,
194 27 Upplands Väsby, SWEDEN
info@directadental.com

DIRECTA
directadental.com



ProphyCare® Prophy Paste CCS Olika grovlekar för olika behov

Prophy Paste CCS är överträffad vad gäller hanterbarhet, handhavande och applicering. Den unika formeln gör pastan stänkfri och homogen, den torkar inte heller ut, våtskar sig eller separerar. Tjockare lager av plack och tandsten avlägsnas enkelt med Blå eller Grön liksom att Röd och Gul ger vackra polerade ytor. Pastan efterlämnar en frisk och behaglig mintsmaak efter varje behandling. Pastan är förpackat i färgkodade tuber samt i Single Dose engångs koppar. Finns att tillgå i 4 olika grovlekar, från grov till extra fin. Innehåller 0,1% fluoride.

“Perfekt att börja med,
avlägsnar effektivt
envisa fläckar”



**ProphyCare® Prophy Paste CCS,
RDA 250, Blå, Grov**

Art.nr: 731113 Prophy Paste CCS tub, 96g 60ml
Art.nr: 690123 Prophy Paste CCS single dose, 144x2g

- Bra grovlek att starta med
- För starkt missfärgade ytor och tjockare lager av plack
- Tar effektivt bort envisa fläckar orsakade av t.ex kaffe, te och tobak
- Slipmedel: Pimpsten
- Innehåller 0,1% fluoride
- Används i kombination med andra Prophy Paste CCS pastor

“Mindre avverkande
men ändå effektiv”



**ProphyCare® Prophy Paste CCS
RDA 170, Grön, Medium**

Art.nr: 731114 Prophy Paste CCS tub, 97g 60ml
Art.nr: 690122 Prophy Paste CCS single dose, 144x2g

- Perfekt start då den grövsta (RDA 250) pastan inte behövs
- För tjockare lager av plack och missfärgade ytor
- Tar effektivt bort fläckar orsakade av t.ex kaffe, te och tobak
- Slipmedel: Pimpsten
- Innehåller 0,1% fluoride
- Används i kombination med andra Prophy Paste CCS pastor

“Försiktig rengöring,
vävnadsvänlig
fläckborttagare”



**ProphyCare® Prophy Paste CCS
RDA 120, Röd, Fin**

Art.nr: 731112 Prophy Paste CCS tub, 84g 60ml
Art.nr: 690121 Prophy Paste CCS single dose, 144x2g

- För borttagning av plack och ytmissfärgningar
- För mindre mängd plack, rotytor och lätt missfärgade ytor
- Lämplig för rengöring av implantat
- För polering av fyllningar
- Slipmedel: kiseldioxid
- Innehåller 0,1% fluoride
- Används i kombination med andra Prophy Paste CCS pastor

“Idealisk för
slutpolering”



**ProphyCare® Prophy Paste CCS
RDA 40, Gul, Extra Fin**

Art.nr: 731111 Prophy Paste CCS tub, 84g 60 ml
Art.nr: 690120 Prophy Paste CCS single dose, 144x2g

- För slutlig polering av tänder och fyllningar
- För barntandvård
- Låg avverkning, idealisk för polering vid cervikala tandborstskador
- Utmärkt för polering av implantat
- Ger en slät yta
- Idealisk efter luftbläster behandling
- Slipmedel: kiseldioxid
- Innehåller 0,1% fluoride
- Används i kombination med andra Prophy Paste CCS pastor

#1 Maximal hygien

Alltid en fräsch försluten förpackning. Ingen risk för krosskontamination, samt högsta möjliga hygien garanti för patienten.

4 anledningar att använda Prophy Paste CCS Single Dose

#2 Lätt att fästa

Enkel att hantera, koppen fäster lätt på handsken eller annan yta.

#3 Inget spill

Den grunda förpackningen med rundad botten är designad för att minimera spill. Allt innehåll kan enkelt hämtas av putskoppen.

#4 Perfekt storlek

Varje förpackning innehåller en optimal kvantitet pasta för en behandling.

ProphyCare® Prophy Paste CCS Single Dose Blå, Grön, Röd och Gul

Finns förpackade i en sortiments- och refillförpackning
Art.nr: 690119-23, 144 single dose x 2

- Single Dose koppar à 2g
- Stänkfri
- Fluoravgivande
- Maximal hygien
- Mild mintsmaak
- Enkel att skölja bort
- En bekväm vidhäftningsförmåga underlättar koppens placering på valfria underlag
- Levereras i enstaka grovlekar alternativt i sortimentsförpackning med 144 koppar
- Komplet med användarguide som underlättar val av rätt pasta för varje behandlingstillfälle
- Miljövänlig förpackning



Prophy Paste CCS single dose är tillgänglig i en sortimentsförpackning eller i refillförpackning. Sortimentsförpackningen innehåller en användarguide vilken underlättar valet av rätt pasta vid varje tillfälle. Förpackningen är utformad för att hålla engångskopparna på plats och för att snabbt ge en överblick över innehållet och för att användaren enkelt ska kunna välja det som behövs för nästa behandling. Välj pastans grovlek efter att ha utvärderat graden av missfärgningar, hur mycket exponerat dentin, mängd av cement, fyllnadsmaterial, graden av demineralisering osv. Använd minst två olika grovlekar vid varje behandling – RDA 250 och/eller RDA 170 för rengöring, och RDA 120 och/eller RDA 40 för polering.



Öppna förpackningen, avlägsna den skyddande folien från den klistriga ytan, och fäst förpackningen på t.ex handsken...

... eller på vilken annan yta som helst. Den grunda koppen gör att all putsfasta kan användas utan spill.

Användarguide ProphyCare® Prophy Paste CCS

	Blue RDA 250	Green RDA 170	Red RDA 120	Yellow RDA 40
Att börja med	●	●		
Kraftig missfärgning	●			
Tjockare plack	●	●		
Missfärgade tänder		●		
Universalpasta			●	
Liten mängd plack			●	
Rotytor			●	
Lätt missfärgade tänder			●	
Fyllningar			●	
Barntandvård				●
Cervikala tandborstskador				●
Implantat			●	●
Slutlig polering			●	●
Efter luftbläster behandling			●	●
Slutlig polering				●


Välj rätt Prophy Paste CCS beroende på vad som ska rengöras och mängd missfärgning.

För bästa resultat och hållbarhet, använd minst två olika Prophy Paste CCS RDA vid varje tillfälle – RDA 250 och/eller RDA 170 för rengöring, och RDA 120 och/eller RDA 40 för polering. Vi rekommenderar att alltid byta puts kopp då man byter grovlek.


RDA kan mätas enligt två olika skalor, 10 eller 100.

ProphyCare PRO mäts med 10-skalan och prophy paste CCS med 100 – skalan.

Homogen mix av slippartiklar säkerställer ett professionellt resultat.

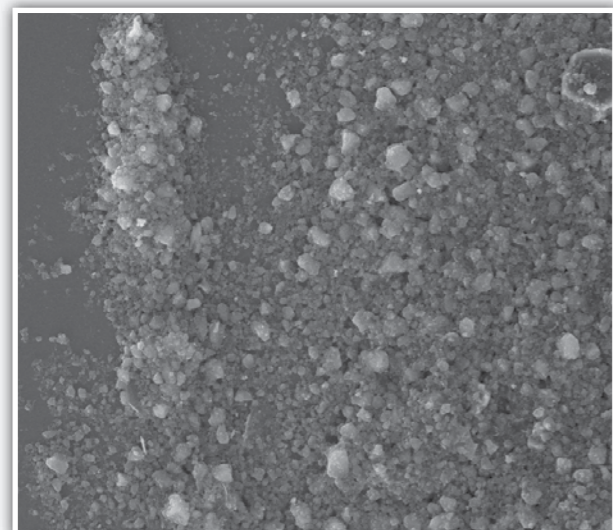

Elektronmikroskop bild av Prophy Paste CCS

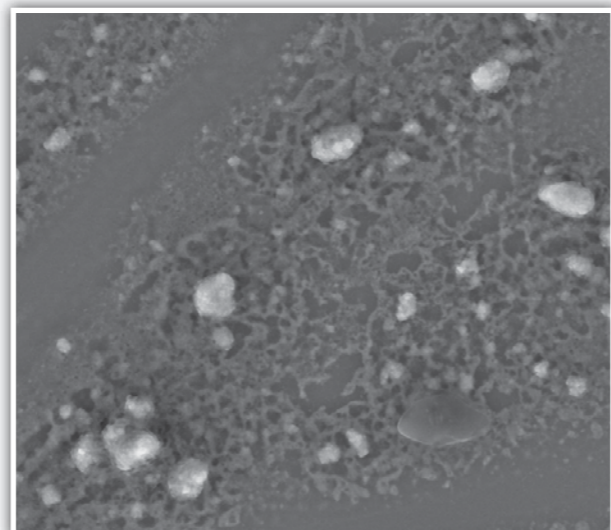

Elektronmikroskop bild av annat fabrikat

ProphyCare® Prophy Paste CCS

- Tillhandahålls i färgkodade tuber alternativt i single dose förpackningar, tillverkas i 4 olika grovlekar från grov till extra fin
- Innehåller 0,1% fluoride, minimerar kariesrisken
- Kan användas i kombination med klorhexidin
- Innehåller castorolja, smörjer mot muntorrhet
- Optimerad konsistens för låg materialförbrukning: skvättfri homogen formel
- Stannar kvar i putskoppen, skvätter inte eller torkar ut, vätskar sig inte eller separerar
- Optimal förpackningsstorlek – lätt att dosera, enkel att hålla ren, lätt att förvara
- Mild mintsmaak
- Neutralt pH värde (5-6)





“Rengör,
polera och
desensibilisera”

ProphyCare® Prophy Paste PRO Lila Universal

Art.nr: 741111 Prophy Paste PRO tub, 84g 60ml
Art.nr: 690125 Prophy Paste PRO, single dose, 144x2g

Integrerad rengöring och polering

Prophy Paste PRO's höga rengöringsförmåga omvandlas till en försiktig polering i takt med att slippartiklarna bryts ned.

Enstegs behandling

Samma pasta används för både fläckborttagning och för slutlig polering. Prophy Paste PRO ger jämförbara rengörings- och poleringsresultat samt minskar behandlingstiden.

Liten avverkning men ändå enastående rengöringseffekt

Prophy Paste PRO's låga RDA värde på 20 erbjuder effektiv fläckborttagning i början av behandlingen och minskar gradvis till ett lägre RDA värde på 5, vilket ger putspastan sin slutliga poleregenskap i slutet av behandlingen.

Desensibilisering

Innehåller en desensibiliserande beståndsdel för att försluta dentin tubuli och minimera hyperkänslighet. Till exempel efter scaling.

Remineraliserande innehåll

Innehåller fluoride för att remineralisera emaljen efter polering, ökar även karies skyddet.

Enkel att använda

Skvätter inte, vätskar sig inte eller separerar. Finns i single dose alternativt i tuber.

Hög patient acceptans

Pastans milda mintsmaak och tilltalande textur är behaglig för patienter i alla åldrar.

ProphyCare® Prophy Paste PRO

- Rengör, polerar och desensibiliserar
- Innehåller 0,1% fluoride, minimerar kariesrisken
- Kan användas i kombination med klorhexidin
- Innehåller castorolja, smörjer mot muntorrhet
- Optimerad konsistens för låg materialförbrukning: skvättfri homogen formel
- Stannar kvar i putskoppen, skvätter inte eller torkar ut, vätskar sig inte eller separerar
- Finns i tuber och Single Dose förpackningar
- Optimal förpackningsstorlek – lätt att dosera, enkel att hålla ren, lätt att förvara
- Mild mintsmaak
- Neutralt pH värde (5-6)

Användarguide


ProphyCare® Prophy Paste PRO

Prophy Paste PRO pastan bryts ner från grov till fin under behandlingen.


Prophy Paste PRO	
Bra att börja med	●
Hårt missfärgade ytor	
Tjockare plack	
Missfärgade tänder	●
Universalpasta	●
Mindre mängd plack	●
Rotytor	●
Lätt missfärgade tänder	●
Fyllningar	●
Barntandvård	●
Cervikala tandborstskador	●
Implantat	●
Slutlig polerig	●
Efter luftblästning	●
Kan användas för polering efter scaling för att undvika postoperativ hyperkänslighet	●

RDA värde mäts i två skalor 10 och 100. Prophy Paste PRO mäts i 10-skalan och CCS prophy paste i 100-skalan.

Homogen mix av slippartiklar säkerställer ett professionellt resultat.

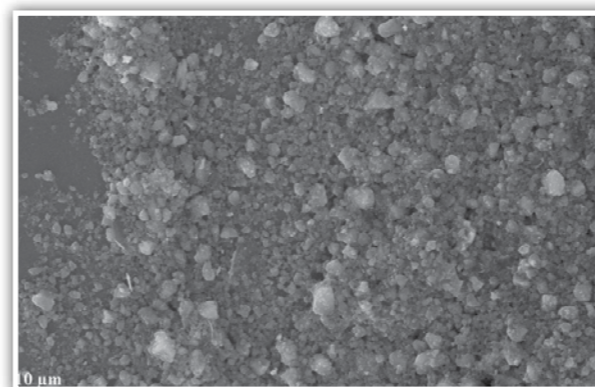

Elektronmikroskop bild av Prophy Paste CCS.

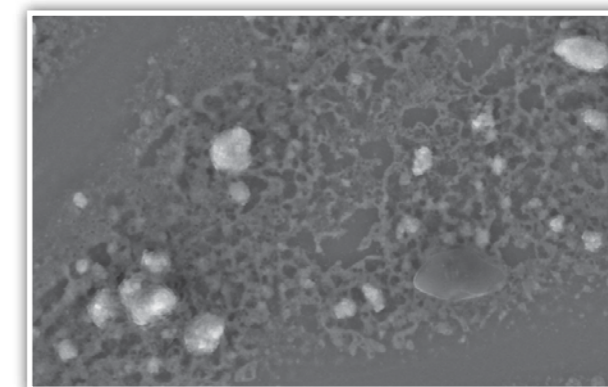

Elektronmikroskop bild av annat fabrikat.


4 anledningar att använda ProphyCare® Prophy Cup

#1 Rillor på insidan

Insidans design minimerar skvätt och minskar friktionen vilket gör fläckborttagningen effektivare.

#2 Utvändiga retentionsknoppar

Utsidans retentionsyta optimerar den approximala rengöringen och minskar risken för skvätt. Koppens mjuka kant och något koniska form ökar den subgingivala tillgängligheten.

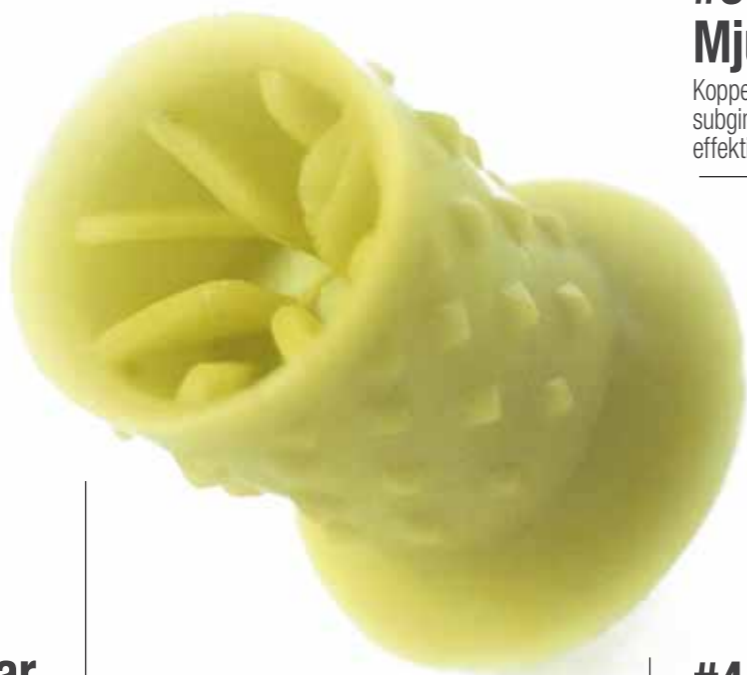

#3 Mjuk kant

Koppens mjuka flexibilitet ökar den subgingivala tillgängligheten och effektiviserar plackborttagningen.

#4 Skyddande bas

En bredare bas designad för att förhindra putsastan från att tränga in i vinkelstycket



Putskoppens design med en mjuk kant underlättar hämtning av putsfasta, och tömmer förpackningen helt.

ProphyCare® Prophy Cup Optimal rengöring, utmärkt fasthållning av putsastan

Art.nr: 690131 Prophy Cups, screw-in, 144 st

Art.nr: 690132 Prophy Cups, latch type, 144 st

- Den exklusiva putskoppens form och flexibilitet anpassar sig till tandens konturer och ökar det selektiva borttagandet och den approximala rengöringen, kräver mindre tryck och mindre belastning för operatören
- Anpassad storlek för enklare tillgång i svårtillgängliga områden, utan att tappa putsfasta
- Mjuk och flexibel för att ge ökad subgingival tillgänglighet – masserar samtidigt gingivan försiktigt och når ner i fickorna för en effektiv borttagning av plack och biofilm
- Insidans rillor håller en adekvat mängd putsfasta och minimerar risken för skvätt vilket medför bättre fläckborttagning
- Utsidans retentionsknoppar optimerar approximal rengöring mjuk, flexibel och 100% latexfri
- Bredare bas förhindrar putsastan från att nå vinkelstycket
- Passar de flesta utrymmen, för både vuxen- och barnbehandling
- Ersätter spetsformade polerare
- Speciellt framtagen att passa Prophy Care Prophy Paste
- Endast för engångsbruk. Koppen skall kastas efter användande, och vid byte till annan pasta.
- Tillverkas i vibrationsfri screw type och i latch type (rostfritt stål). Förpackning med 144 styck.




Rillorna på koppens insida ökar möjligheten att hålla kvar putsastan och minska risken för skvätt.

4 anledningar att använda ProphyCare® Prophy Angle

#1 Rillor på insidan

Insidans design minimerar risken för skvätt och ökar friktionen vilket gör fläckborttagningen effektivare

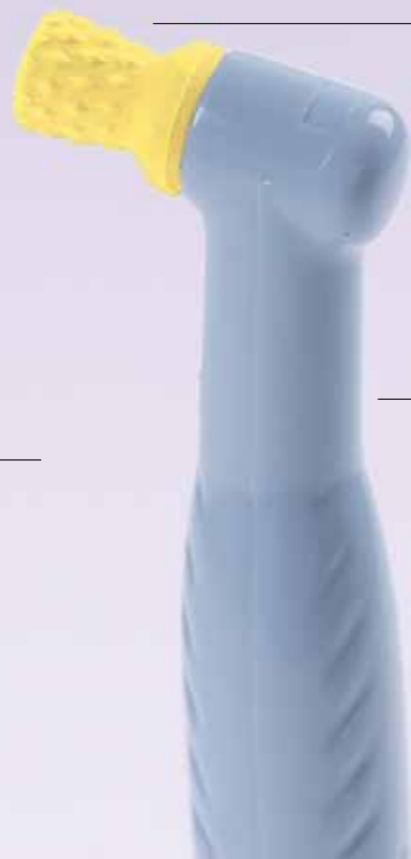

#2 Utvändiga retentionsknoppar

Utsidans retentionsyta optimerar den approximala rengöringen och minskar risken för skvätt. Koppens mjuka kant och något koniska form ökar den subgingivala tillgängligheten

#3 Maximal hygien

En design som minimerar risken för krosskontamination och reducerar underhåll av vinkelstycket

#4 Ergonomisk design

Tunn hals, ergonomisk vinkel och runt huvud ger förbättrad insyn och mer komfortabel tillgänglighet till alla områden i munnen

ProphyCare® Prophy Angle Maximal hygien, förbättrad komfort

Art.nr: 690130 Prophy Angel, 144 styck

- Engångs putsvinkelstycke i polykarbonat med mjuk, flexibel 100% latexfri puts kopp, passar lågvarvs profylax vinkelstycks underdel
- Individuellt förpackat engångs profylaxvinkelstycke med integrerad puts kopp
- Minskar risken att pasta partiklar tränger in i vinkelstycket och förstör mekanismen
- Ergonomisk form med smal hals, runt huvud och en vinkel som förbättrar tillgängligheten till posteriora tänder och ger en högre patientkomfort samt bättre handledsrörelser för användaren
- Den exklusiva puts koppens form och flexibilitet anpassar sig till tandens konturer och ökar det selektiva borttagandet och den approximala rengöringen, kräver mindre tryck och mindre belastning för operatören
- Anpassad storlek för enklare tillgång i svårtillgängliga områden, utan att tappa puts pasta
- Mjuk och flexibel för att ge ökad subgingival tillgänglighet – masserar samtidigt gingivan försiktigt och når ner i fickorna för en effektiv borttagning av plack och biofilm
- Insidans rillor håller en adekvat mängd puts pasta och minimerar risken för skvätt vilket medför bättre fläckborttagning
- Utsidans retentionsknoppar optimerar interproximal rengöring
- Passar de flesta utrymmen, för både vuxen- och barn behandling
- Ersätter spetsformade polerare
- Speciellt framtagen att passa ProphyCare® Prophy Paste
- Endast för engångsbruk. Koppens skall kastas efter användande, och vid byte till en pasta med lägre RDA
- Individuellt förpackade, 144 styck i varje förpackning



Lägg an puts kppen lätt mot rotytan vid låg hastighet, tryck till lätt för att kppen ska glida in i sulcus.



Rör vinkelstycket för att anpassa puts kppen till de tänkta tandytorna, även till de approximala ytorna. Arbeta från tandens gingivala tredjedel till den incisala tredjedelen. ProphyCare designen möjliggör både approximal och subgingival rengöring.



Applicera önskad mängd putspasta i engångskoppen FixyDap och fäst den på lämplig yta.



ProphyCare® Prophy Paste Tuber med FixyDap™

Atr.nr: 411484 FixyDap™ 250 styck

- Ett praktiskt och hygieniskt alternativ till att applicera Prophy Paste CCS
- Kan fästas på brickkanten eller häftas till annan yta som t.ex handsken
- Engångskoppar, 250 styck

ProphyCare® leende garanteras!

Artikel Nummer

ProphyCare® Prophy Paste CCS Tubes, supplied in multiples of 20

Prod No	Product Description	Quantity
731113	Prophy Paste CCS Blue RDA 250, 125 micron	96g 60ml
731114	Prophy Paste CCS Green RDA 170, 70 micron	97g 60ml
731112	Prophy Paste CCS Red RDA 120, 20 micron	84g 60ml
731111	Prophy Paste CCS Yellow RDA 40, 2 micron	84g 60ml

Transport package 120 tubes

ProphyCare® Prophy Paste PRO Tubes, supplied in multiples of 20

Prod No	Product Description	Quantity
741111	Prophy Paste PRO	102g 60 ml

Transport package 120 tubes

ProphyCare® Prophy Paste CCS, Single Dose

Prod No	Product Description	Quantity
690123	Prophy Paste CCS Blue RDA 250, 2 gram	144 single doses x 2 gram
690122	Prophy Paste CCS Green DA 170, 2 gram	144 single doses x 2 gram
690121	Prophy Paste CCS Red RDA 120, 2 gram	144 single doses x 2 gram
690120	Prophy Paste CCS Yellow RDA 40, 2 gram	144 single doses x 2 gram
690119	Prophy Paste CCS Mix, 2 gram	144 single doses x 2 gram

ProphyCare® Prophy Paste PRO, Single Dose

Prod No	Product Description	Quantity
690125	Prophy Paste PRO Lilac, 2 gram	144 single doses x 2 gram

ProphyCare® Prophy Angle

Prod No	Product Description	Quantity
690130	Prophy Angle	144 pcs

ProphyCare® Prophy Cups

Prod No	Product Description	Quantity
690131	Prophy Cups, screw-in	144 pcs
690132	Prophy Cups, latch type	144 pcs

ProphyCare® FixyDap

Prod No	Product Description	Quantity
411484	FixyDap, disposable dappens	250 pcs

Transport package 18 boxes

